

Gebruik van Avance® Solo

Enkele aandachtspunten als u wordt behandeld met het Avance® Solo NPWT-systeem (wondbehandeling met negatieve druk)



Avance® Solo
Leidraad voor de patiënt


Mölnlycke®



Inhoud

Kennismaking met NPWT

(wondbehandeling met negatieve druk)

NPWT en Avance® Solo

04-05

Aandachtspunten bij het gebruik van Avance® Solo

Wat u moet doen en wat u moet vermijden bij een behandeling met het Avance® Solo NPWT-systeem

06-07

Onderhoud van uw Avance® Solo

Informatie over de reiniging en het onderhoud van uw medische hulpmiddel en betekenis van de audiovisuele signalen

08-11

Scan de QR-code met uw telefoon om de patiëntenzone op de website van Avance® Solo te bezoeken. **U vindt er instructievideo's, downloadbare documenten enz.**



Opmerking: Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u problemen ondervindt. Doe dat zeker bij bloedingen, hoge bloeddruk of problemen met het medische hulpmiddel. Met vragen kunt u terecht bij uw mantelzorger:

Naam: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

**U wordt behandeld met
Avance® Solo NPWT van Mölnlycke®.
In deze brochure vindt u informatie
over het gebruik en onderhoud
van het medische hulpmiddel.
Lees ze zorgvuldig door.**

**Wat zijn de verschillende
onderdelen van Avance® Solo?**




Wat is wondbehandeling met negatieve druk (NPWT)?

Wondbehandeling met negatieve druk (NPWT, Negative Pressure Wound Therapy) is een methode om wonden te behandelen met zuigkracht. Het verband is luchtdicht en de pomp bouwt onderdruk op, waardoor exsudaat en vocht van de wond worden weggezogen.

Wat zijn de voordelen van NPWT?

- Bevordert de genezing van complexe en traag helende wonden¹.
- Betere voorbereiding van het wondbed, wat de genezing bevordert¹.
- Helpt zwellingen te beperken en beschermt de wond tegen besmetting van buitenaf².

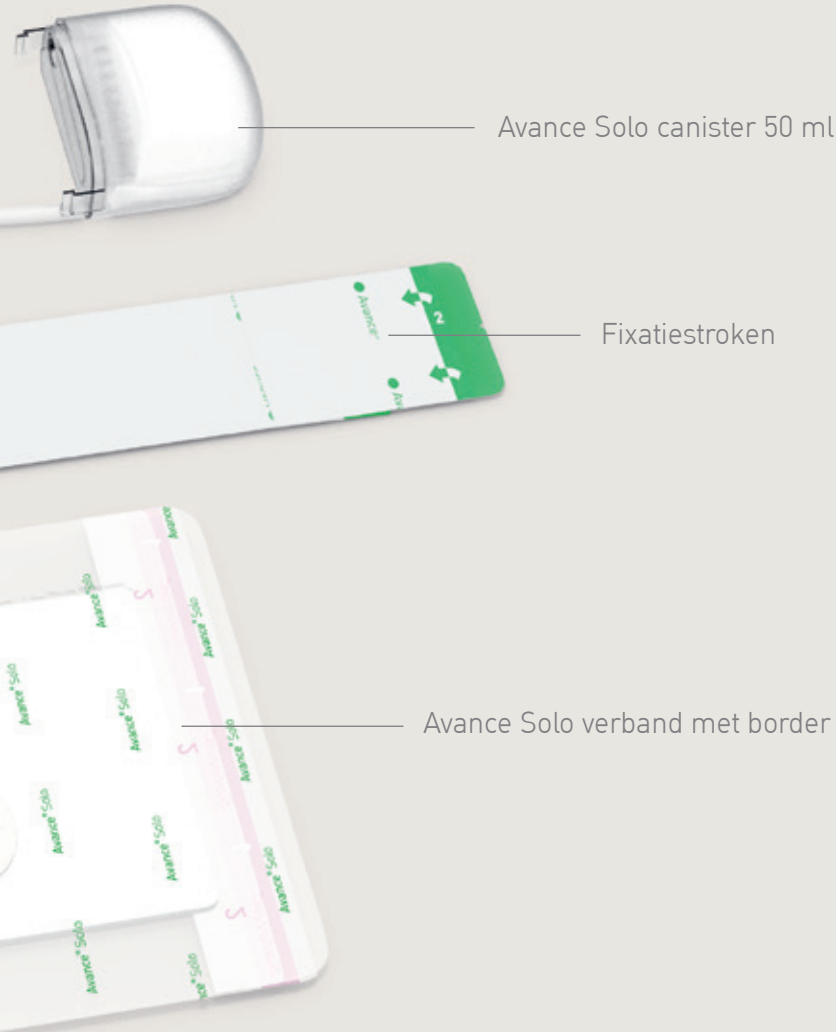

Aandachtspunten bij het gebruik van Avance® Solo

Avance® Solo is een medisch hulpmiddel en het is belangrijk dat u er goed zorg voor draagt. Lees de instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing voor patiënten die u in de productverpakking vindt.

Niet doen:

- Zelf verbanden vervangen.
- Het verband, het medische hulpmiddel, de canister of de slangen blootstellen aan te koude of te warme waterstralen (bedrijfstemperatuur 5-40 °C).
- Het verband, de pomp, de canister of de slangen in water onderdompelen.
- Gebruiken in een vliegtuig. Batterijen verwijderen tijdens een vliegreis.
- Het medische hulpmiddel uit elkaar nemen of veranderen.
- Het medische hulpmiddel binnen het bereik van kinderen of huisdieren plaatsen.

Belangrijke kenmerken:

- Zorg ervoor dat u de visuele en geluidsalarmen voor lekkage, verstopping en laag batterijniveau van de Avance® Solo pomp kent. Zie pagina 11 voor een lijst van signalen en alarmen.
- De pomp levert continu gereguleerde negatieve druk af. Hierbij ontstaat een pulserend geluid. Dit is volkomen normaal en toont aan dat het systeem werkt.²⁻⁷ Indien nodig kan uw zorgverlener u een nachtkoffer geven voor een betere nachtrust.
- Controleer of het verband strak zit en stevig aanvoelt. Raadpleeg een zorgverlener als dat niet het geval is. Neem bij problemen onmiddellijk contact op met uw zorgverlener.

Draag en plaats het medische hulpmiddel zodanig dat u het volgende vermijdt:

- Beknelling of verstikking (bijv. slang rond een lichaamsdeel gedraaid).
- Afbinden of blokkeren van de slangen.
- Zorg er bij gebruik van de riemclip voor dat die zich aan een van de zijanten van uw middel bevindt.
Als u de clip voor uw comfort of gemak aan de voorzijde plaatst, neem hem dan weg voor u gaat zitten. Zo vermijdt u dat de pomp uit de clip wordt geduwd.

Hoe zorg ik voor mijn dagelijkse hygiëne?

Een korte douche is toegestaan, maar het is belangrijk om de pomp uit de buurt van water te houden.


Het verband is waterbestendig, maar mag niet worden blootgesteld aan directe waterstralen.

Volg de onderstaande aanwijzingen om besmetting te voorkomen.


Volg deze stappen bij een korte douche:



1 Pauzeer de behandeling door de groene startknop op de pomp ingedrukt te houden en na twee (2) seconden los te laten.

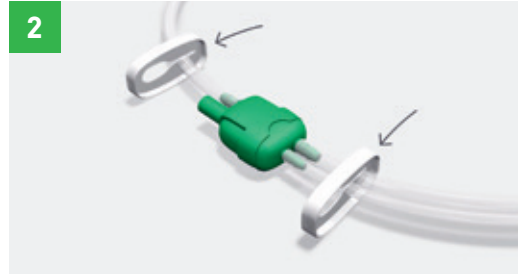


2 Klem de slang van de canister en de verbandslang vast door de schuifklemmen naast de groene connectoren te plaatsen en over de slangen te schuiven tot ze vastzitten.

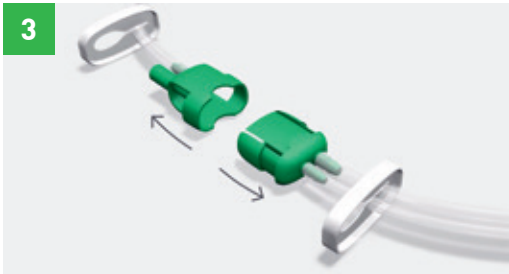

3 Koppel de slang van de canister met pomp los van de verbandslang. Plaats het deel met de pomp op veilige afstand van de douche.



4 Zorg ervoor dat de verbandslang niet in water wordt ondergedompeld wanneer u een douche neemt.

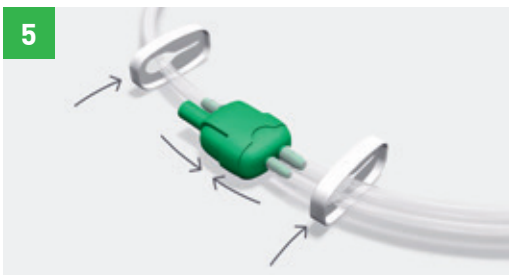

5 Sluit na het douchen het verband weer aan op de pomp en de canister door de groene connectoren aan te sluiten. Maak de twee klemmen los zodra ze zijn aangesloten.



6 Hervat de behandeling door de knop ingedrukt te houden en na twee (2) seconden los te laten, tot de pomp in werking treedt en de knop knippert.


Onderhoud van uw Avance® Solo

De canister vervangen

U kunt zien of de canister moet worden vervangen in het doorzichtige kijkvenster aan de achterzijde van de canister, als er een alarm voor verstopping van de pomp is. Volg de hierna beschreven stappen om de canister te vervangen. Probeer de canister altijd samen met een zorgverlener te vervangen wanneer u Avance® Solo ontvangt.




1 Pauzeer de pomp door de groene startknop ingedrukt te houden en na twee (2) seconden los te laten. De pomp geeft twee pieptonen om te bevestigen dat ze in de pauzestand staat.

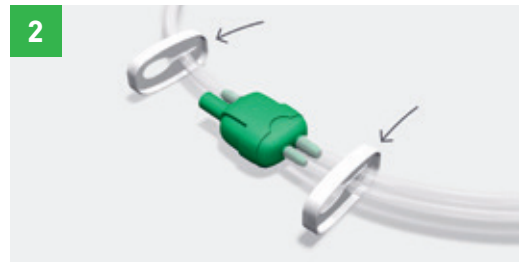

2 Schuif de slangklemmen naar de groene connectoren en duw beide klemmen over de slang, zodat er geen vocht lekt bij het loskoppelen.



3 Maak de slang aan de achterkant van de pomp los. Druk hard op de plastic lipjes aan de zijkant en trek voorzichtig heen en weer om de canister los te koppelen. Sluit de nieuwe canister aan. U zult merken dat de canister stevig vastzit. Dit is normaal en noodzakelijk voor een doeltreffende afdichting.

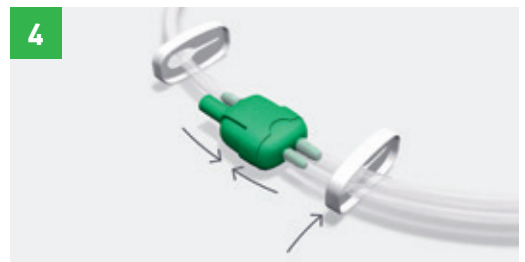

4 Sluit de twee groene connectoren opnieuw aan, maak de klem op de verbandslang los en herstart de pomp door de groene startknop ingedrukt te houden en na twee (2) seconden los te laten. Controleer of de negatieve druk werkt: het verband moet strak zitten en stevig aanvoelen.

De batterijen vervangen

U moet de twee (2) batterijen vervangen bij een alarm voor te lage batterijspanning of na 7 dagen. Gebruik uitsluitend lithiumbatterijen van het type AA 1,5V GP15LF.

Voer de volgende stappen uit om de batterijen te vervangen:

- Als de pomp nog werkt, zet ze dan uit door de groene startknop ingedrukt te houden en na twee (2) seconden los te laten.
- Open het batterijvak door het klepje te verschuiven.
- Verwijder de batterijen.
- Plaats nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de pluspool (aangeduid met +) en minpool (aangeduid met -) van elke batterij overeenkomen met het +/- symbool in het batterijvak.
- Sluit het klepje van het batterijvak.
- Herstart de pomp door de groene startknop ingedrukt te houden en na twee (2) seconden los te laten. Controleer of de negatieve druk werkt: het verband moet strak zitten en stevig aanvoelen.



Het medische hulpmiddel reinigen

De pomp mag af en toe worden gereinigd met een vochtige doek of met een niet-schurend reinigingsmiddel. Plaats de pomp niet onder stromend water.



Neem ook zeker een kijkje in de patiëntenzone van de Avance Solo website!

U vindt er onder meer instructievideo's over de onderwerpen in deze brochure.



Wat betekenen de signalen van Avance® Solo?

Het medische hulpmiddel gebruikt verschillende signalen om u te waarschuwen over de werking of voor een mogelijke interventie. Zorg ervoor dat u de verschillende signalen kunt horen en ze begrijpt.

Alarmen en probleemoplossing

Beschrijving visuele en geluidssignalen



Het indicatielampje voor **lekkage** knippert elke seconde.
De pomp geeft herhaaldelijk een alarm met een piepton en zal dan stilvallen.



Het indicatielampje voor **verstopping** knippert elke seconde.
De pomp geeft herhaaldelijk een alarm met een piepton en zal dan stilvallen.



Het indicatielampje voor **laag batterijniveau** knippert om de vijf (5) seconden.
Wanneer er minder dan 4 uur batterijvermogen overblijft, knippert het lampje voor **laag batterijniveau** elke seconde en geeft de pomp herhaaldelijk een piepton.



Alle indicatielampjes knipperen tegelijkertijd elke seconde en de pomp geeft herhaaldelijk een piepton.

Opmerking: Het regelmatige pulserende geluid van de pomp is volkomen normaal. Het toont aan dat het systeem werkt.

Mogelijke oorzaak	Probleemoplossing
Er is een luchtlek vastgesteld.	<p>Om een lek te herstellen: Druk de verbandrand en de stroken aan voor een beter contact met de huid.</p> <p>Controleer of de canister aan de pomp is bevestigd, of de canisterslang aan de canister is bevestigd en of de verbandslang is aangesloten op de canisterslang.</p> <p>Druk op de groene startknop om de pomp opnieuw te starten.</p> <p>Als het lek niet is hersteld, geeft de pomp opnieuw een alarm voor lekkage en wordt de behandeling gepauzeerd. Neem in dat geval contact op met uw zorgverlener.</p>
De canister is vol of de slang is verstopt.	<p>Om een verstopping te herstellen: Zorg dat er in de slang geen knik zit of dat ze niet afgeklemd is. Als de canister vol is, vervangt u deze volgens de instructies op pagina 8 van dit document of onder punt 7.3 van de gebruiksaanwijzing (in de productverpakking).</p> <p>Druk op de groene startknop om de pomp opnieuw te starten.</p> <p>Als de verstopping niet is opgelost, geeft de pomp opnieuw een alarm voor verstopping en wordt de behandeling gepauzeerd. Neem in dat geval contact op met uw zorgverlener.</p>
De batterijen zijn bijna leeg.	<p>Om de batterijen te vervangen: Vervang de batterijen volgens de instructies op pagina 9 van dit document of onder punt 7.4 van de gebruiksaanwijzing (in de productverpakking). Gebruik alleen het type en model van lithiumbatterijen die door Mölnlycke Health Care voor dit product worden aanbevolen. Druk op de groene startknop om de pomp opnieuw te starten.</p>
Alarm voor interne storing en de pomp kan niet worden gestart.	Neem contact op met uw zorgverlener of met Mölnlycke Health Care.

Proving it every day

Mölnlycke® ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de behandeling van wonden, de verhoging van de veiligheid en efficiëntie bij heelkundige ingrepen, en de preventie van doorligwonden. Deze oplossingen leiden mee tot betere resultaten en worden ondersteund door klinische en gezondheidseconomische bewijzen.

Bij alles wat wij doen, hebben wij maar één doel: professionele zorgverleners helpen om optimaal te presteren. En wij zijn vastbesloten om dat elke dag te bewijzen.

Referenties:

1. Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdahl, A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care 2017;26: 3, Suppl 3, S1–S113. 2. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J 2016; doi: 10.1111/iwj.12612. 2–7. Data on file (ref10) (ref15) (ref17) (ref18) (ref23) (ref24).

Meer informatie op www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care B.V., Van Deventerlaan 31–51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel: +31 76 521 96 63.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, Avance en Safetac zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. NLWC00042305

